

## EASY ON-PC SPIROMETER PERFEKT FÜR DIE ARBEITSMEDIZIN

KLEIN - LEICHT - ROBUST



## UNSER MEISTVERKAUFTES SPIROMETER FÜR DIE BETRIEBSMEDIZIN

Ultraportabel für Spirometrien vor Ort

DAS EASY ON-PC SPIROMETER VON NDD

Extrem kleines, hygienisches Spirometer mit widerstandsfreier Messung. Das Gerät kommt nicht mit der Atemluft der Probanden in Berührung. Durch modernste Ultraschallmessung keine Kalibrierung notwendig, hohe Messgenauigkeit. Bakterienfilter möglich.

Vollständig integriert, PC gestützte Messung. Sie führen die Messung am Bildschirm durch, das Gerät führt durch die Untersuchung und ermöglicht schnelle, aussagekräftige Ergebnisse mit automatischer Interpretation nach neuesten Empfehlungen.

Schnittstellen zu allen arbeitsmedizinischen Softwaresystemen integrieren die Spirometrie nahtlos in Ihr Patientenmanagement.

IN DER ARBEITSMEDIZIN VERTRAUT NDD MEDICAL AUF VOSS MEDIZINTECHNIK



## NDD EASY ON-PC SPIROMETER

Optimal für den Einsatz in der Betriebsmedizin

Intuitiv bedienbares System auf PC-Basis

Automatisierte Benutzerführung während des gesamten Manövers gemäss ATS/ERS-Standards 2019 und 2005

Reproduzierbare Ergebnisse gewährleisten Vergleichbarkeit bei Multi-Center-Studien

Unmittelbare Bewertung der Testqualität nach ATS/ERS-Kriterien

Z-Score, LLN und %Sollwert zur schnellen Testinterpretation

Exportmöglichkeit für PDF und Rohdaten

GDT - und XML-Schnittstellen für problemlose Integration

Absolut hygienische Lösung mit Einmalartikel Spirette, dadurch Vermeidung von Kreuzkontamination

Konfigurierbare Testreports, Leistungsfähiges Datenmanagement

Qualität, Medizinprodukte & elektrische Sicherheit:

ISO 13485, ISO 14971, IEC 62366, IEC 62304, ISO 26782, ISO 23747, IEC 60601-1, IEC 60601-2, ISO 10993-1


FDA 510(k) Freigabe

Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG CE-Kennzeichnung

Fachgesellschaften & Institute ATS/ERS 2019 und 2005, NIOSH/ OSHA, SSA Disability

Integriertes Mundstück

Ultraschallsensoren 1 und 2

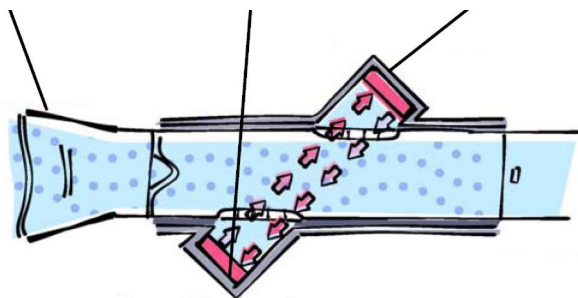

Hygienische Messung dank günstiger Einmal-Spiretten



**Audiometer - Tretkurbel-Ergometer - RR Blutdruckmessgeräte - Defibrillatoren - Sehtestgeräte - Perimeter**

Unser ingenieurgeführter Service-Center bietet alle Leistungen, die Sie als Betriebsmediziner(in) benötigen:

- Seit 1996 eichamtlich zugelassener Audiometer-Wartungsdienst
- Sicherheitstechnischen Kontrollen(Stk) nach §6 MPBetreibV
- Messtechnische Kontrollen(Mtk) nach §11 MPBetreibV
- Persönliche/telefonische Beratung und Betreuung
- Geräteeinweisungen/Seminare/Schulungen/ für Anwender und Techniker

**SERVICE - SPEZIALIST FÜR ARBEITSMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK & AUDIOMETRIE**